

Detergent for Spincell 5 Series IVD

INTENDED USE

Detergent is used with matching analyzer for daily maintenance and flow system and probe cleaning.

FUNCTIONS

With the functions of emulsification and catalysis, the Detergent emulsifies the fat, distributes the solidified dirt and transforms the protein into water-soluble amino-acids to maintain the cleanness of tubes and flow-cells. With effective humidification, it also discharges the bubbles from the entire flow system and ensures a normal working performance. The Detergent will not stain, corrupt the tubes or shorten instrument's service life.

INGREDIENTS

Preservative Solution	2 g/L
Chloride Sulfate	20 g/L
Buffer Solution	1 g/L
Anticoagulant	1~2 g/L
Surfactant	3 g/L

STORAGE & STABILITY

This product will be stable for 24 months when stored unopened in a dark place to avoid sunlight. Once opened, this product should be consumed within 60 days and stored below 35°C.


OPERATIONS

1. Place the Detergent container beneath the analyzer to avoid direct sunlight. Keep away from cooling or heating air outlet.
2. Use it at 15°C~30°C.
3. Connect Detergent container with the analyzer according to Operation Manual.

RESTRICTIONS, PRECAUTIONS & NOTICE

1. Use the reagent under the professional technician's guidance.
2. Make sure that the reagent matches with your analyzer. Any mismatch will lead to misleading results.
3. Avoid contacting with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
4. Avoid inhaling the evaporated reagent.
5. Tight up the container's cap to prevent from volatilization and contamination.
6. Once opened, dispose the remains over 60 days.
7. If product has been frozen, let product warm to room temperature, and then gently invert product to mix it completely. Verify background results before use.

SYMBOLS ON PACKAGING & LABELS

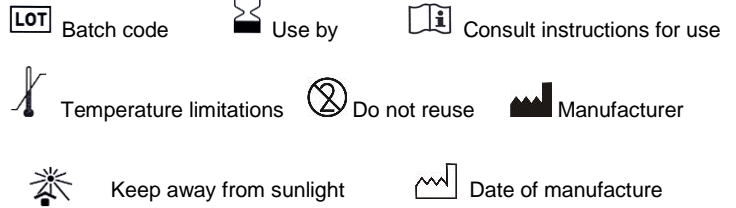

SPINREACT SAU

Ctra.Santa Coloma, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (GI) SPAIN

Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 00 99

e-mail: spinreact@spinreact.com

PACKAGING

Ref. 1705680

Cont

1 x 20 L

Detergente para Spincell 5 Series IVD

USO PREVISTO

El detergente se utiliza con un analizador compatible para el mantenimiento diario, del sistema de flujo y la limpieza de la aguja.

FUNCIONES

Con las funciones de emulsión y catálisis, el Detergente emulsiona la grasa, resuspende restos solidificados y transforma las proteínas en aminoácidos solubles en agua para mantener la limpieza de los tubos y de las células de flujo. Con una humidificación efectiva, también elimina las burbujas en todo el sistema de flujo proporcionando un rendimiento de trabajo normal. El Detergente no teñirá ni corromperá los tubos ni acortará la vida útil del instrumento.

INGREDIENTES

Solución conservante	2 g/L
Sulfato de cloruro	20 g/L
Solución tampón	1 g/L
Anticoagulante	1~2 g/L
Surfactante	3 g/L

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Este producto será estable durante 24 meses cuando se almacene sin abrir en un lugar oscuro evitando la luz solar. Una vez abierto, este producto deberá consumirse en un plazo de 60 días y se almacenará por debajo de 35 °C.


OPERACIONES

1. Coloque el recipiente de Detergente debajo del analizador para evitar la luz solar directa. Manténgalo alejado de la salida de aire de refrigeración o calentamiento.
2. Utilícelo a 15°C ~ 30°C.
3. Conecte el recipiente de Diluyente con el analizador de acuerdo con el Manual de Funcionamiento.

RESTRICCIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1. Utilice el reactivo bajo la dirección de un técnico profesional.
2. Asegúrese de que el reactivo coincide con su analizador. Cualquier desajuste conducirá a resultados inexactos.
3. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuague de inmediato con abundante agua y busque atención médica.
4. Evite inhalar el reactivo evaporado.
5. Enrosque correctamente la tapa del recipiente para evitar la volatilización y la contaminación.
6. Una vez abierto, desechar pasados 60 días.
7. Si el producto se ha congelado, deje que el producto llegue a la temperatura ambiente y luego invierta suavemente el producto para su completa homogeneización. Verifique el funcionamiento del reactivo antes de usarlo con muestras reales.

SÍMBOLOS EN EL ENVASE Y ETIQUETADO

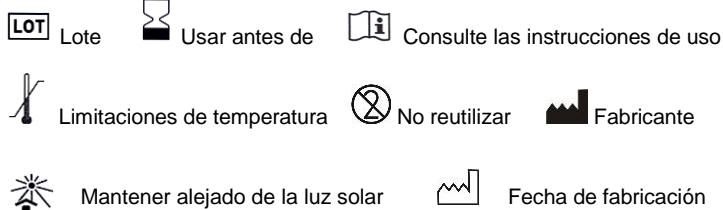

SPINREACT SAU

Ctra.Santa Coloma, 7 E-17176 SANT ESTEVE DE BAS (GI) SPAIN

Tel. +34 972 69 08 00 Fax +34 972 69 00 99

e-mail: spinreact@spinreact.com

PRESENTACIÓN

Ref. 1705680

Cont

1 x 20 L